

■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。


■2.セット内容

本体、USBケーブル、TV接続ケーブル、ハンドストラップ、ネックストラップ、観察用ケース、取扱説明書（本書）

■3.特長

- 最大140倍の倍率で拡大できる液晶画面付顕微鏡です。
- 2.4インチ大型液晶画面を搭載しています。
- 4つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。

■4.各部の名称と働き

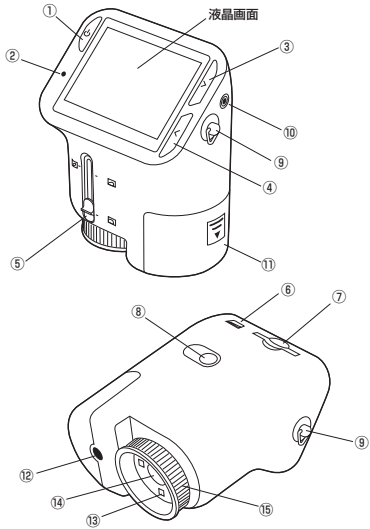


①電源/ズームボタン	ボタンを長押し(約2秒)すると電源をON/OFFできます。電源ONの状態はこのボタンを押すとデジタルズーム機能が作動します。2倍→3倍→4倍→1倍の順で変化します。
②電源LED	電源がONになっていると赤いLEDが点灯します。
③カーソル右ボタン/メニュー	項目を選択します/メニュー画面を表示します。
④カーソル左ボタン/プレビュー	項目を選択します/撮影した内容を確認できます。
⑤ズーム切替	1倍、3.5倍、35倍の倍率が設定できます。
⑥USBポート	付属のUSBケーブルでパソコンと接続し、画像や動画を取込むことができます。
⑦SDカードスロット	SDカードを挿入します。挿入されたSDカードを再度押し込むと取出すことができます。
⑧決定/撮影ボタン	項目を決定します。/ ボタンを押すと撮影を行います。
⑨ストラップ取付け金具	ネックストラップ、ハンドストラップを取付けるときに使用します。
⑩TV出力端子	カメラの映像をテレビに出力できます。
⑪電池カバー	下向きにスライドすると電池ケースが開きます。
⑫観察用ケース取付けネジ	観察用ケースを取付けすることができます。
⑬LEDライト	LED照明で被写体を照らします。
⑭カメラ撮影部	カメラ撮影部
⑮レンズカバー	被写体との撮影距離を調節する時に使用します。

■5.電池・SDカードの入れ方

<電池の入れ方>

電池カバーを矢印の方向にスライドさせ、単3乾電池2本(別売り)を入れます。
※本体の内部に表示された電池の向きで入れてください。

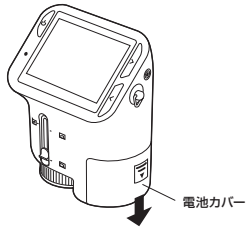


<SDカードの入れ方>

向きに注意して、SDカード(別売り)を挿入します。
挿入したSDカードをさらに押し込むと取出すことができます。




■6.液晶画面の表示説明

静止画モード / 連続モードの表示

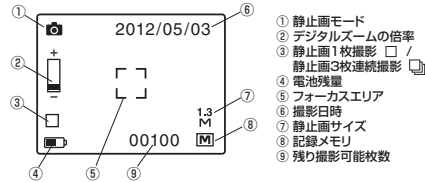


- ① 静止画モード
- ② デジタルズームの倍率
- ③ 静止画1枚撮影 □ / 静止画3枚連続撮影
- ④ 電池残量
- ⑤ フォーカスエリア
- ⑥ 撮影日時
- ⑦ 静止画サイズ
- ⑧ 記録メモリ
- ⑨ 残り撮影可能枚数

動画モードの表示

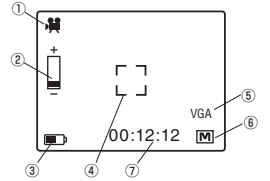

- ① 動画モード
- ② デジタルズームの倍率
- ③ 電池残量
- ④ フォーカスエリア
- ⑤ 動画サイズ
- ⑥ 記録メモリ
- ⑦ 撮影時間


プレビューモードの初期表示

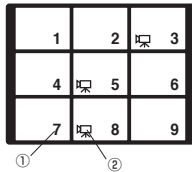

- ① ファイル番号
- ② 動画ファイルアイコン


■7.メニュー画面表示説明

- 1.電源/ズームボタン①を押し電源を入れます。
- 2.カーソル右ボタン/メニューボタン③を押すとメニュー画面を表示します。
- 3.決定/撮影ボタン⑧ボタンを押し決定します。

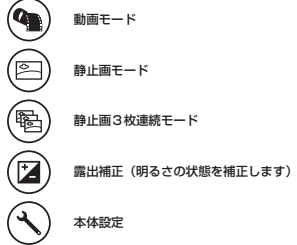

■8.本体設定方法

- 1.メニュー画面を表示し、③もしくは④のボタンを押して「本体設定」マークを選択します。
- 2.決定/撮影ボタン⑧ボタンを押し決定します。

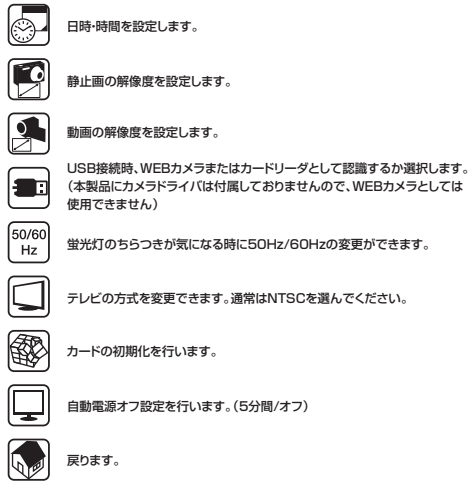

■9.簡単な撮影方法

静止画一枚を撮影する

- 1.電源/ズームボタン①を押し電源を入れます。
- 2.レンズカバー⑮を回転させピント調整をします。
- 3.決定ボタン⑧を押すと静止画を撮影します。
- 4.電源/ズームボタン①を押すと、デジタルズーム機能が作動します。
- 5.光学ズームを使用する場合、⑤のレバーを操作してください。1倍、3.5倍、35倍の位置でピントが合います。

静止画三枚連続で撮影する

- 1.電源/ズームボタン①を押し電源を入れます。
- 2.カーソル右ボタン/メニューボタン③を押してメニュー画面を表示し、③もしくは④のボタンを押して「静止画3枚連続モード」マークを選択します。その後決定/撮影ボタン⑧ボタンを押し決定します。
- 3.レンズカバー⑮を回転させピント調整をします。
- 4.決定ボタン⑧を押すと静止画を3枚連続で撮影します。
- 5.電源/ズームボタン①を押すと、デジタルズーム機能が作動します。
- 6.光学ズームを使用する場合、⑤のレバーを操作してください。1倍、3.5倍、35倍の位置でピントが合います。

動画を撮影する


- 1.電源/ズームボタン①を押し電源を入れます。
- 2.カーソル右ボタン/メニューボタン③を押してメニュー画面を表示し、③もしくは④のボタンを押して「動画モード」マークを選択します。その後決定/撮影ボタン⑧ボタンを押し決定します。
- 3.レンズカバー⑮を回転させピント調整をします。
- 4.決定ボタン⑧を押すと動画の録画が開始されます。もう一度⑧を押すと録画を停止します。
- 5.電源/ズームボタン①を押すと、デジタルズーム機能が作動します。
- 6.光学ズームを使用する場合、⑤のレバーを操作してください。1倍、3.5倍、35倍の位置でピントが合います。

■10.プレビューモード

- 1.静止画/動画モードでカーソル左ボタン/プレビューボタン④を押すと、プレビューモードになります。
- 2.プレビュー画面を表示し、③もしくは④のボタンを押してファイルを選択します。その後決定/撮影ボタン⑧ボタンを押すと、選択ファイルが全画面表示されます。
- 3.撮影モードに戻るには、プレビューメニューから終了を設定します。

■11.プレビューメニュー画面の設定

- 1.プレビューモード中に電源/ズームボタン①を押します。
- 2.プレビューメニュー画面を表示し、③もしくは④のボタンを押して項目を選択します。
- 3.決定/撮影ボタン⑧ボタンを押し決定します。

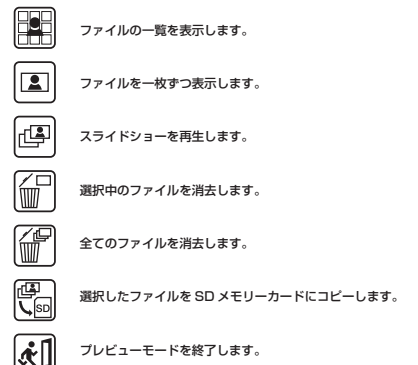

■12.パソコンとの接続方法

付属のUSBケーブルを使用して撮影した画像、動画をパソコンに取り込むことができます。

- 1.本製品の電源をOFFにします。
- 2.本製品とパソコンのUSBポートに付属のUSBケーブルで接続します。
- 3.本製品の電源をONにします。自動的にパソコンに認識されます。

※USBのポートを持つパソコンにのみ接続が可能です。

■13.TVとの接続方法

付属のTV接続ケーブルを使用して撮影した画像、動画をTVに表示させることができます。

- 1.本製品の電源をOFFにします。
- 2.本製品のTV出力端子⑩に付属のTV接続ケーブルを接続します。
- 3.TV接続ケーブルのもう一方をTVの外部入力に接続します。
- 4.本製品の電源をONにします。
- 5.TVを外部入力に切替るとTV画面に表示されます。

■14.仕様

センサ	130万画素CMOSセンサー
倍率	最大140倍(光学3.5倍または35倍、デジタルズーム2倍、3倍、4倍)
静止画サイズ	2M(1600×1200) 1.3M(1280×960) VGA(640×480)
静止画フォーマット	JPEG
動画サイズ	VGA(640×480) QVGA(320×240)
動画フォーマット	AVI(MJPEG)
ディスプレイ	2.4インチTFT液晶
記録メディア	SD, SDHC
対応OS	Windows 7/Vista/XP
接続方式	USB
電源	単3乾電池×2本
サイズ・重量	W73×D54.5×H96.5mm・96g
付属品	USBケーブル、TV接続ケーブル、ハンドストラップ、ネックストラップ、観察用ケース、取扱説明書（本書）